


PD 1000



Sauerstoff

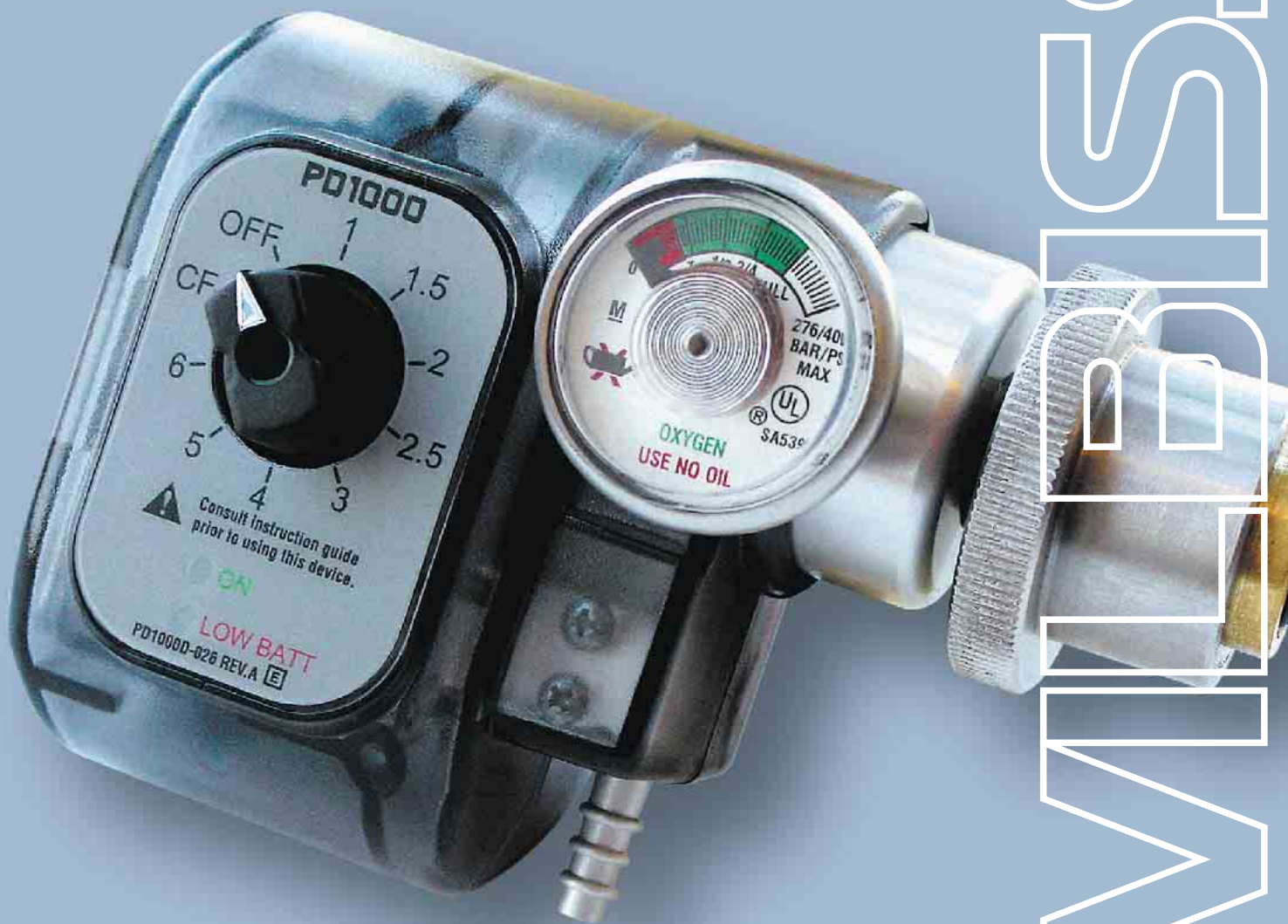

Sauerstoffsparsystem mit integriertem Druckregler

SUNRISE
MEDICAL

PD 1000

Das PD 1000 ist eine handliche und leichte Kombination aus Sparventil und integriertem Druckminderer für den direkten Anschluss an eine Druckgasflasche. Es reguliert den benötigten Sauerstoff durch die Öffnungszeit eines elektronisch angesteuerten Ventils und verfügt über einen fix eingestellten Backupflow von 2 l/min, falls eine kontinuierliche Sauerstoffabgabe aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Alle Merkmale auf einen Blick

- Kompaktes und einfaches System, kein zusätzlicher Druckminderer nötig
- Normale Nasenkanüle benutzbar
- Geschützter Anschluss für Nasenbrille
- Klein, kompakt und leicht
- Floweinstellung von 1 - 6 l/min in Stufen wählbar
- Kontinuierlicher Flow von 2 l/min. einfach per Drehschalter einstellbar
- Energieversorgung durch zwei Mignonzellen (AA) mit einer maximalen Nutzungsdauer von bis zu 200 Stunden
- Effiziente Sauerstoffeinsparung von bis zu 3:1
- Stabiles und leichtes Gerät
- Pulse Dose® Technik – die Öffnungszeit des Ventils bestimmt die abgegebene Sauerstoffmenge
- 2 Jahre Garantie

Patientensicherheit

- Akustischer Alarm bei Atemimpulsunterbrechung (Apnoe)
- Batteriewarnung (LED rot blinkend; Batteriereserve 4 - 6 Stunden)
- Optische Anzeige zur Bestätigung der Impulsauslösung (grüne LED)
- Begrenzung auf 40 Sauerstoffimpulse pro Minute, um eine Überversorgung zu verhindern



Wahlschalter und Warnanzeigen



Druckmanometer



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	7,1 cm x 8,6 cm x 12,0 cm							
Gewicht	570 g (620 g mit Batterien)							
Betriebsspannung	2 x Mignonzellen Typ AA (oder entsprechende Akkus)							
Sauerstoffabgabe in l/min	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Sauerstoffabgabe in cm ³	16,5	24,8	33,0	41,3	49,5	66,0	82,5	99,0
Betriebsarten	kontinuierlich / gepulst							
Betrieb								
Temperaturbereich	von 5° C bis 40° C (relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 95 %)							
Lagerung								
Temperaturbereich	von - 20° C bis + 60° C (relative Luftfeuchtigkeit bis 95 %)							
Sicherheitsstandard	IEC 6001.1, CSA CAN / CSA No.601.1-M90							
Garantie	2 Jahre							

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SUNRISE
MEDICAL

Händler:

0604/2000/ST-entv/0690152

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / Heidelberg
Tel. + 49 (0) 72 53/980-460
Fax + 49 (0) 72 53/980-220
www.sunrisemedical.de
devilbiss@sunrisemedical.de

CE 0044

SUNRISE
MEDICAL