

Swift™ LT-F

NASENPOLSTER-MASKE

Die erste Maske speziell für Frauen

Einzigartiges, modernes Design

Frisurfreundlich

Spezielle Passform

**Minimaler Kontakt,
optimale Stabilität**

Besonders leise

Gemustertes Kopfband

in einer angenehmen,
attraktiven Farbe

Doppelwandige Nasenpolster

bewirken eine sanfte, komfortable
Abdichtung; die dünne Außenmembran
sorgt für hohen Tragekomfort, die
festere Innenmembran sorgt für Stabilität

Flexibler Polstersockel

ermöglicht Bewegung der
Nasenpolster in verschiedene
Richtungen, für beste Passgenauigkeit und
höchste Leckagesicherheit

Schmäler, weicher Silikon- Maskenrahmen

erleichtert das Schlafen in Seitenlage

Um 360 Grad drehbares Kniestück mit leisen Ausatemöffnungen

Wählen Sie selber die optimale Schlauchposition.
Die Ausatemöffnungen streuen die austretende
Luft und leiten sie geräuscharm und unauffällig
ab.

Flexibler, leichter Schlauch

verringert den Zug auf die Maske
und erhöht die Stabilität



Optionaler Schlauchhalter

Drei arretierbaren
Positionen für eine
individuelle
Schlauchfixierung



Optionale Komfortpolster

Samtweich und angenehm erhöhen Sie den
Tragekomfort und sind leicht waschbar


Stabilisatoren

sind flexibel, halten die Swift LT in Position und
passen sich der Gesichtsform an

Click-Fit-Justierung

hilft bei der Wahl des optimalen Tragewinkels
und hält die Position auch beim Abnehmen des
Maskenkissens

Schmäler, weicher Silikon-Maskenrahmen
erleichtert das Schlafen in Seitenlage

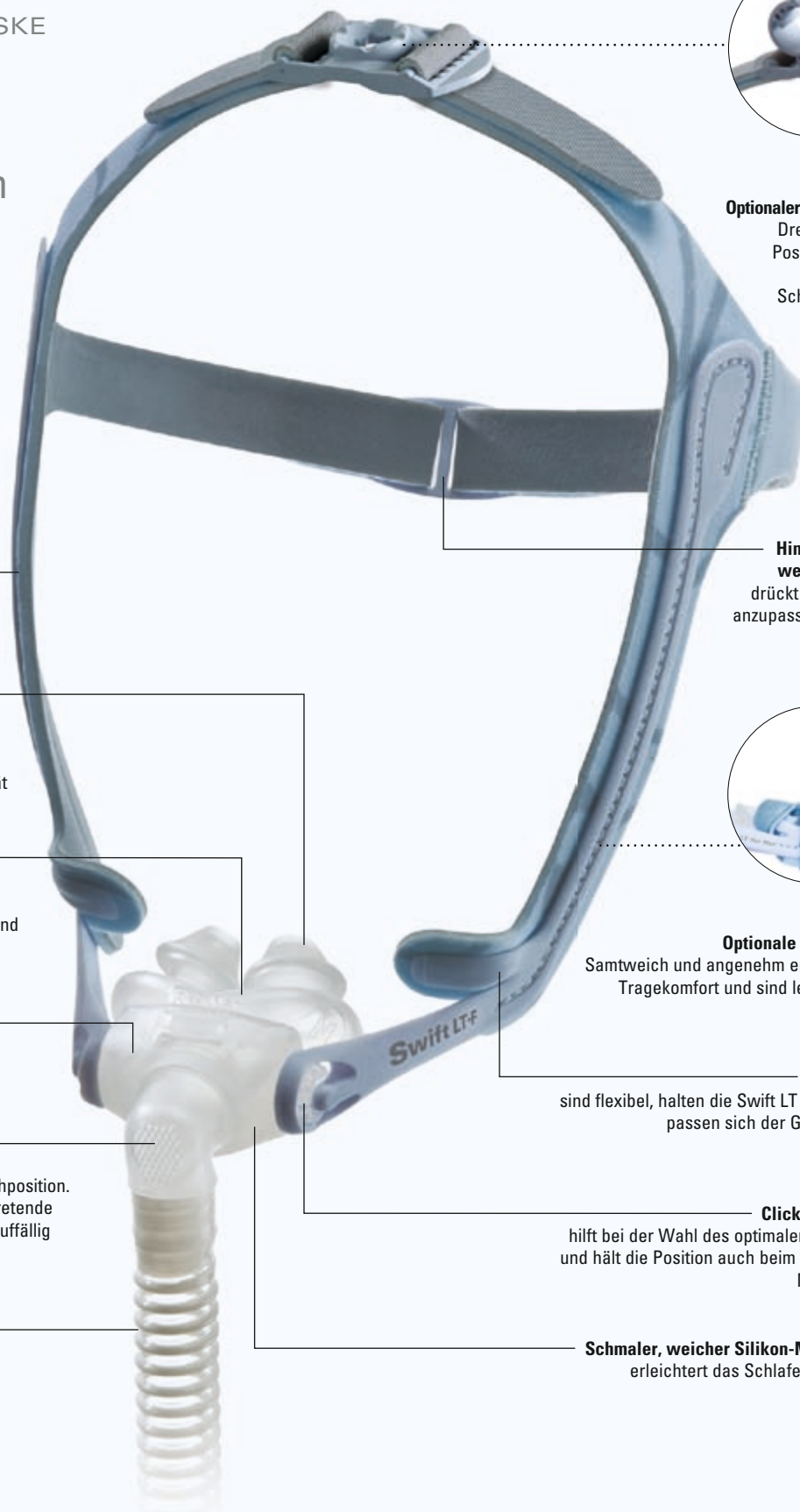



SCHONEND IM UMGANG MIT DEM HAAR

Ergonomisches hinteres Kopfband

- Swift LT-F hat ein unauffälliges hinteres Kopfband mit einem weichen Clip und ist angenehm einfach zu bedienen. Das Haar kann unter oder über dem hinteren Kopfband getragen werden. Das Haar bleibt ordentlich, unabhängig davon, ob es offen oder gebunden getragen wird.

Minimalistisches Design

- Beeinträchtigt wenig
- Gibt ein Gefühl von Freiheit – das persönliche Empfinden spielt dabei ebenso eine Rolle wie das Aussehen der Maske beim Tragen.
- Das durchdachte Design bietet nur geringfügig mehr Kontakt mit dem Haar als viele moderne Haarbänder.

VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

Sanft im Umgang mit dem Haar

- Unabhängig davon, ob das Haar kurz oder lang, gebunden oder offen getragen wird.

Bewegungsfreiheit und Stabilität

- Doppelwandige Nasenpolster und flexibler Polstersockel passen sich der Bewegung an und gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung.
- Die Klickjustierung und die Stabilisatoren halten die Maske in angenehmer und stabiler Position.

Individuelle Passform

- Die Klickjustierung ermöglicht die Wahl des optimalen Nasenpolster-Winkels.

Verschiedene Schlafpositionen

- Durch Einstellung der gewünschten Schlauchposition mit dem Schlauchhalter ist ein Schlafen in Seiten- und/oder Rückenlagen möglich.

Geräuscharmer Betrieb für ungestörten Schlaf

- Das innovative Luftauslass-Design sorgt für flüsterleisen Betrieb – nur 25 Dezibel.*

WEITERE VORTEILE

Schnell anzupassen

- Die schnelle und einfache Anpassung der Swift LT-F spart erheblich Zeit.

Weniger Lagerhaltung, entwickelt speziell für Frauen**

- Drei mitgelieferte Nasenpolster-Größen (inkl. Extra-Small) passend für Frauen; es muss nur ein Artikel vorgehalten werden.

Einfache Handhabung

- Die Swift LT-F besteht aus nur wenigen Teilen und ist dadurch einfach zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen.

Einfache Einweisung der Nutzerin

- Gebrauchsanweisung und Online-Support erleichtern die Einweisung von Benutzern und Mitarbeitern.

Bessere Compliance der Patienten

- Die Swift LT-F ist auf die Bedürfnisse von weiblichen Patienten, auf hohen Komfort und einfache Handhabung ausgelegt.

* Getestet nach ISO 3744:1994 bei 10 cm H₂O

** Basierend auf anthropometrischen Untersuchungen von ResMed



Die Größenauswahl passend für Frauen

Swift LT-F wird im Set mit den drei Nasenpolstergrößen Extra-Small, Small und Medium geliefert – passend für jede Nase.

ARTIKELNUMMER

Swift LT-F Nasenpolster-Maskensystem

Extra-Small, Small, Medium

60589