

Ultra Mirage™ II

NASENMASKE

Erleben Sie, was Millionen von Menschen bereits geholfen hat

Ultra-bequem

Die Ultra Mirage II mit dem doppelwandigen Mirage Maskenkissen bietet vitalen Komfort, sorgt für Stabilität, reduziert die Wahrscheinlichkeit von Leckagen und Druckstellen und trägt so dazu bei, einen sicheren und bequemen Sitz zu erzielen, ohne dass das Kopfband zu straff angezogen werden muss.

Ultra-praktisch


Die Ultra Mirage II ist einfach anzulegen und in vier praktischen Größen erhältlich. Die Stirnstütze lässt sich im Liegen mit nur einer Hand individuell einstellen.

Ultra-leise

Die Ultra Mirage II ist eine sehr leise Maske. Die ausgeatmete Luft wird geräuscharm abgeleitet, ohne den Bettpartner zu stören.

Ultra-effektiv

Die Ultra Mirage II bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit und Stabilität.

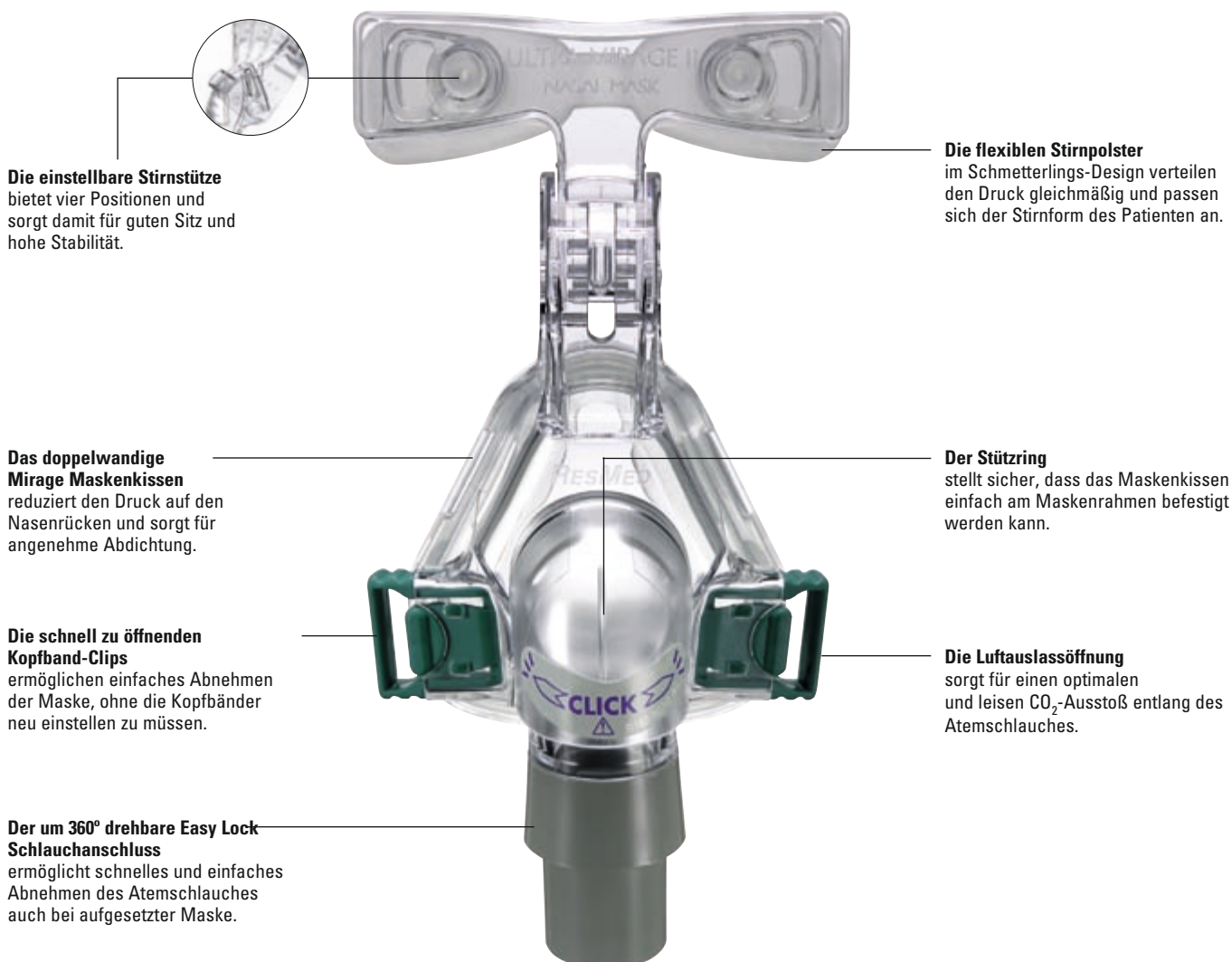

TECHNISCHE HIGHLIGHTS




Doppelwandiges Mirage Maskenkissen
– für optimale Abdichtung.



Einstellbare Stirnstütze – einfach im Liegen einzustellen.



Flexibles einteiliges Stirnpolster – zur besseren Druckverteilung.

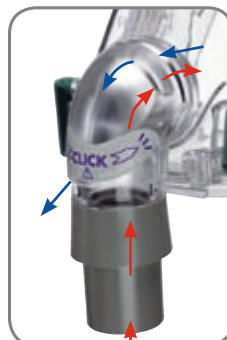

Einzigartiges Luftauslassdesign – leise, mit definiertem Ausatemfluss.



Um 360° drehbares Kniestück – Flexibilität bei der Atemschlauchposition.

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Zuverlässiger Komfort durch bewährte Technologie

- Die Mirage Maskenkissen-Technologie reduziert den Druck auf die Nase und optimiert Maskensitz und Komfort.

Hervorragender Sitz durch höchste Stabilität

- Die einstellbare Stirnstütze und die ergonomisch geformten Stirnpolster tragen zu einem sicheren Maskensitz bei, selbst wenn sich der Patient bewegt.

Anwenderfreundlichkeit

- Bequem zu öffnende Kopfband-Clips ermöglichen ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Maske. Ist das Kopfband einmal angepasst, muss es nicht erneut eingestellt werden.
- Der Easy Lock Schlauchanschluss ermöglicht das einfache Anschließen und Trennen des Atemschlauches ohne dass die Maske abgenommen werden muss – gibt dem Patienten mehr Bewegungsfreiheit.

VORTEILE FÜR DEN KLINISCHEN ANWENDER UND DEN FACHHÄNDLER

Guter Sitz beim ersten Anpassen für mehr Patienten

- Die Kombination aus verstellbarer Stirnstütze und doppelwandigem Mirage Maskenkissen sorgt für perfekten Sitz bei unterschiedlichsten Gesichtsformen.

Patientenzufriedenheit und Compliance

- Höhere Therapieakzeptanz durch sicheren Sitz ab der Erstanpassung.
- Individuelle Passform, Komfort und Abdichtung fördern die langfristige Compliance.
- Die Maske kann schnell und praktisch zusammen- und auseinandergebaut werden.
- Umfassende Informationen für den Patienten durch Gebrauchsanweisung mit Anleitungen zum Anlegen und zur Pflege der Maske.

Kosten- und Zeiteinsparungen

- Kürzere Anpassungs- und Schulungszeit durch einfache, individuelle Einstellmöglichkeiten.
- Weniger Beschwerden: Einfache Anwendung und Anpassung.

ARTIKELNUMMERN

Ultra Mirage II Nasenmaske inkl. Kopfband

Shallow	16547
Shallow-Wide	16578
Standard	16545
Large	16546