

Ultra Mirage™

FULL FACE MASKE

Die Lösung bei Mundleckagen

Mundatmung und -leckagen sind häufige Probleme bei Patienten, die mit CPAP- oder Bilevel-Geräten behandelt werden. Diese Probleme beeinträchtigen die Wirksamkeit der Behandlung und führen zu Unbehagen und Schlaffragmentierung, welche einen Therapieabbruch zur Folge haben können.

Die Ultra Mirage Full Face Maske von ResMed deckt sowohl Nase als auch Mund ab und gewährleistet somit eine wirksame Therapie, auch im Falle von Mundatmung oder -leckagen.

Schnell zu öffnende Kopfband-Clips

ermöglichen das Abnehmen der Maske ohne erneute Einstellung des Kopfbandes und sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz.

Einstellbare Stirnstütze


bietet vier Positionen und sorgt damit für besten Sitz und höchste Stabilität.

Luftauslassöffnungen

sorgen für eine hervorragende CO₂-Auswaschung bei nur minimaler Geräuscentwicklung.

Sicherheitsventil

ermöglicht dem Patienten das Einatmen frischer Luft, wenn das Atemtherapiegerät keinen Luftfluss bereitstellt.

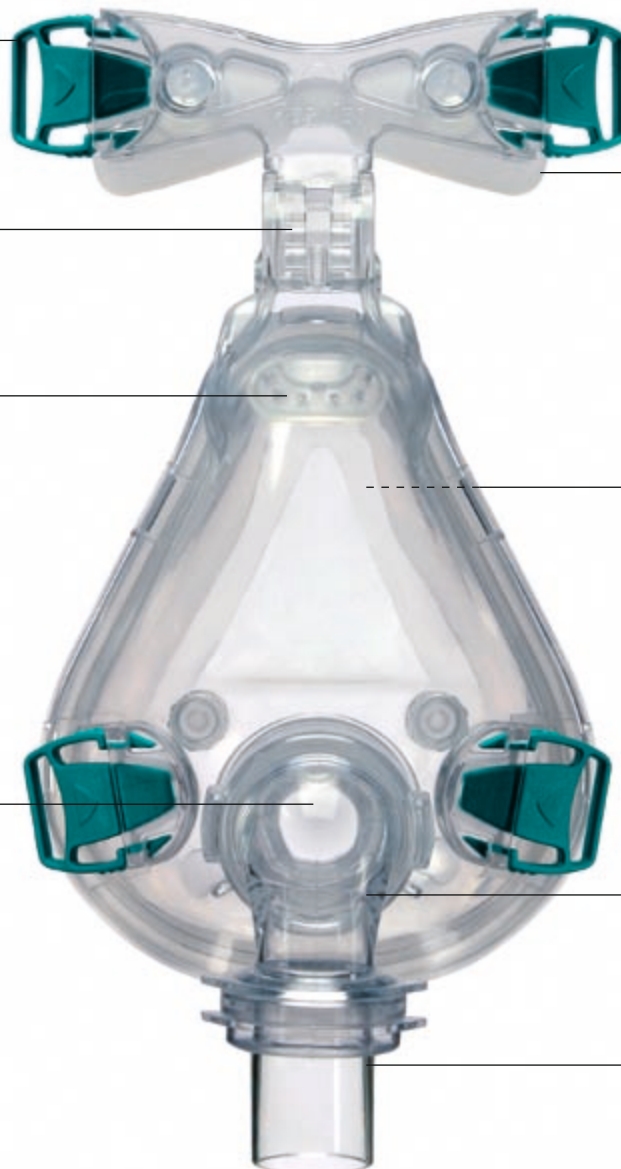

Flexible Stimpolster

im Schmetterlings-Design verteilen den Druck gleichmäßig und passen sich der Stirnform des Patienten an.

Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen

verringert den Druck auf den Nasenrücken und sorgt für optimalen Sitz und höchsten Komfort.

Um 360° drehbares Kniestück

ermöglicht individuelle Positionierung des Atemschlauches.

Abnehmbarer Drehadapter

ermöglicht eine einfache und schnelle Trennung der Maske vom Atemschlauch.



TECHNISCHES HIGHLIGHT – EINSTELLBARE STIRNSTÜTZE UND STIRNPOLSTER

Die einstellbare Stirnstütze sorgt für eine ganz neue Dimension in Sachen sicherer Maskensitz.

- Sie bietet hervorragende Stabilität, indem sie die Bewegungsfreiheit der Maske auf dem Gesicht minimiert. Der Maskensitz bleibt auch dann erhalten, wenn sich der Patient im Schlaf bewegt.
- Vier individuell einstellbare Rasterpositionen stellen den optimalen Sitz und höchsten Komfort sicher.
- Die flexiblen Stirnpolster passen sich selbstständig der Stirnform des Patienten an.
- Der anfallende Druck wird gleichmäßig verteilt und wirkt weniger störend.

Vorteile für den Patienten

• Zuverlässiger Komfort durch bewährte Technologie

Die Mirage-Maskenkissentechnologie reduziert den Druck auf die Nase und optimiert Maskensitz und Komfort.

• Hervorragender Sitz durch höchste Stabilität

Die einstellbare Stirnstütze und die ergonomisch geformten Stirnpolster tragen zu einem sicheren Maskensitz bei, selbst wenn sich der Patient bewegt.

• Anwenderfreundlichkeit

Bequem zu öffnende Kopfband-Clips ermöglichen ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Maske. Ist das Kopfband einmal angepasst, muss es nicht erneut eingestellt werden.

Vorteile für den Arzt

• Die Gewissheit über eine langfristig wirksame Therapie des Patienten

- Da die Maske sowohl Mund als auch Nase abdeckt, sorgt sie selbst im Falle der Mundatmung für eine wirksame Therapie.
- Die Verringerung der Mundatmungsbeschwerden hilft, die Patienten-Compliance zu erhöhen.

• Technische Lösungen für den Therapieerfolg

- Die einstellbare Stirnstütze sorgt für sicheren Maskensitz.
- Minimaler Totraum, überragende Luftstromeigenschaften und integrierte Luftauslassöffnungen sorgen für hervorragende CO₂-Auswaschung.
- Schnell zu öffnende Kopfband-Clips ermöglichen das schnelle Abnehmen der Maske.

- Das integrierte Sicherheitsventil erlaubt die Einatmung frischer Luft, wenn das Atemtherapiegerät keinen Luftfluss bereitstellt.

• Effiziente Auswahl der richtigen Maskengröße

- 3D-Anpassungsschablonen helfen, die Maske schon beim ersten Versuch erfolgreich anzupassen.
- Anpassungsschablonen helfen, Anpassungszeiten zu reduzieren und spätere Nachfragen zu verringern.

ARTIKELNUMMERN

Ultra Mirage Full Face Maske

Small Standard	60610
Small Shallow	60611
Medium Standard	60612
Medium Shallow	60613
Large Standard	60614
Large Shallow	60615