



92 % der Patienten erreichten einen komfortablen, stabilen Sitz mit der AirFit F20 Maske.<sup>3</sup>

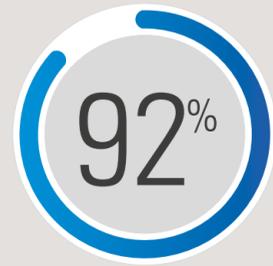

Hochentwickelte Maskenkissen-Technologie: variable Stärke für mehr Komfort und Stabilität

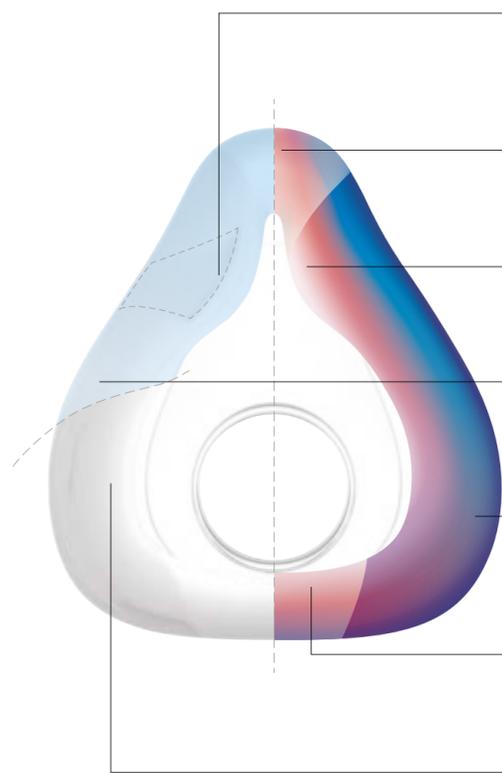

**Innovative doppelwandige Schlaufen**

Für gleichbleibend stützenden Halt und eine zuverlässige Abdichtung, unabhängig von Gesichtsform, Therapiedruck<sup>1</sup> oder Maskenbewegung.

**Weicher Nasenrücken**

Passt sich dem Nasenrücken des Patienten an – für mehr Komfort.

**Anpassungsfähige Flügel**

Die seitlichen Flügel der Maske passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an.

**Mattierte Silikonoberfläche**

Weichere Textur des Maskenkissens im empfindlichen Nasenbereich – für eine angenehmere Abdichtung und einfache Anpassung.

**Stützender Rand**

Gibt den anpassungsfähigen Bereichen des Maskenkissens die für eine sichere Abdichtung erforderliche Stabilität.<sup>4</sup>

**Konturierter Kinnbereich**

Unterstützt den Tragekomfort und die Abdichtungsleistung bei Bewegung.

**Polierte Silikonoberfläche**

Für eine angenehme, zuverlässige Abdichtung im Bereich von Mund und Kieferpartie.

**Komfort** **Stabilität**



Anleitung für Patienten zum Anlegen der AirFit F20



- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Magneten an den unteren Bändern von den Clips gelöst sind.
- Wenn sie nicht gelöst sind, ziehen Sie sie mit einer Drehbewegung vom Rahmen ab.
- Halten Sie die Maske an Ihr Gesicht. Achten Sie dabei darauf, dass der obere Maskenrand auf Höhe der Nasenwurzel verläuft.
- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Achten Sie darauf, dass das ResMed-Logo dabei nach außen zeigt.
- Positionieren Sie die unteren Bänder so, dass sie unterhalb der Ohren verlaufen.
- Verbinden Sie die Magneten mit dem jeweiligen Clip auf dem Rahmen.



- Passen Sie die Verschlüsse auf den oberen Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt.
- Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.
- Wiederholen Sie Schritt 4 mit den unteren Bändern.
- Verbinden Sie den Luftschlauch des Therapiegeräts mit dem Kniestück. Führen Sie dann das Kniestück in den Anschluss an der Maskenvorderseite ein, sodass es mit einem Klicken einrastet.
- Schalten Sie das Therapiegerät ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Zusätzliche Optionen

- Das Kopfband ist so gestaltet, dass unterschiedlichste Frisuren getragen werden können.

<sup>1</sup> AirFit F20 is validated at therapy pressures from 3 to 40 cm H2O. Refer to AirFit F20 user guide.  
<sup>2</sup> Noise emission values in accordance with ISO 4871 at a distance of 1 m, with uncertainty of 3 dBA. Refer to AirFit F20 user guide.  
<sup>3</sup> ResMed fitting study of 39 patients, conducted in 2015. Data on file, ID A3830701.  
<sup>4</sup> ResMed internal study of 22 existing ResMed patients, conducted between 26/04/2016 – 27/05/2016 comparing the market-leading mask with AirFit F20. Preliminary patient study – data on file, ID A3810791.  
<sup>5</sup> Die Nutzung von Masken mit magnetischen Komponenten ist bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:  
 - hämorrhagischer Clip aus Metall zur Behandlung eines Gehirnaneurysmas  
 - Metallsplitter in einem oder beiden Augen aufgrund einer penetrierenden Augenverletzung.

\* Selbstzahlerprodukt

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de  
 Alle genannten Produkte sind Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
 © 2021 ResMed Ltd. Pty., Art.-Nr. 1019718/3, Obj.-ID: C224080 - 3 - 05 21

ResMed.com/AirFitF20



AirFit F20 – da passt einfach alles!

Die AirFit F20 verfügt über ein innovatives Maskenkissen, das auch bei hohen Therapiedrücken<sup>1</sup> erwiesenermaßen die gewünschte Leistung erbringt. Durch das speziell entwickelte Design passt die Maske Patienten mit unterschiedlichsten Gesichtsformen und -größen. Die AirFit F20 gibt es auch als „for Her“ Variante.



Universelle Passform

In einer europäischen Studie passte die AirFit F20 94 % aller Patienten.<sup>2</sup> Sie können Ihre Patienten von Anfang an beruhigt mit einer passenden Maske nach Hause schicken.

Zuverlässige Abdichtung

Das besondere Merkmal dieser Maske ist das nachgiebige Maskenkissen, das erwiesenermaßen Leckagen verhindert, sich den Bewegungen des Patienten anpasst und selbst bei hohen Drücken<sup>1</sup> zuverlässig abdichtet.

Komfortabel

Der flexible, textilmantelnde Rahmen bietet zusätzlichen Komfort und sorgt durch sein spezielles Design außerdem für Stabilität und mehr Sichtfreiheit.

ResMed.com/AirFitF20

Mit dem InfinitySeal-Design ist die AirFit F20 so konzipiert, dass sie sich an die individuellen Gesichtskonturen jedes Patienten anpasst.



Eine europäische Studie hat gezeigt, dass die AirFit F20 94% der Patienten passt.<sup>3</sup>




## Tipps zur Größenbestimmung

Das Maskenkissen der AirFit F20 ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large. Durch das modulare Design der AirFit F20 lässt sich jede Kissengröße leicht in demselben Maskenrahmen befestigen. Ein schneller Wechsel ist ganz unkompliziert möglich.

Wir empfehlen die Verwendung der Anpass-Schablone, um die am besten geeignete Größe für Ihre Patienten zu bestimmen.

Die Schablone steht unter [ResMed.com/AirFitF20](https://www.resmed.com/AirFitF20) zur Verfügung.

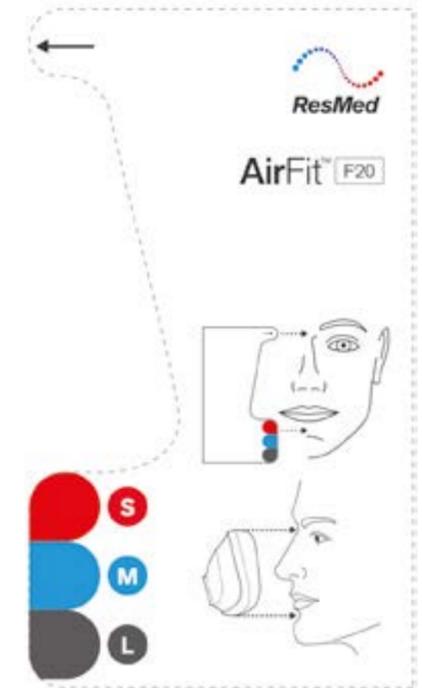

### Freies Blickfeld

Der Rahmen verläuft unterhalb der Augen und sorgt für Stabilität bei gleichzeitig wenig Gesichtskontakt – das bedeutet mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit für Ihre Patienten.

### Weich und geschmeidig

Kopfband aus besonders weichem Textilgewebe passt sich verschiedenen Kopfformen & -größen an.

### Schnelles Anlegen

Die AirFit F20 lässt sich in weniger als einer Minute anlegen.<sup>4</sup> Die magnetischen Clips<sup>®</sup> ermöglichen ein sekundenschnelles An- und Ablegen der Maske.

### Zuverlässige Abdichtung

Das spezielle InfinitySeal-Design des Maskenkissens ermöglicht eine zuverlässige und effektive Abdichtung.

### Weicher, flexibler Rahmen

Der flexible Rahmen passt sich an unterschiedlichste Gesichtsförmigkeiten an. Die Polsterung bietet zusätzlichen Komfort.

### Flexibler Anschluss, mehr Bewegungsfreiheit

Die Schnellösefunktion ermöglicht ein unkompliziertes Anschließen und Abtrennen des Kniestücks während der Nacht. Die 360°-Drehbarkeit sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.



### QuietAir™ Kniestück (optional\*)

Reduziert die Geräuschentwicklung auf nur 21 dB(A)<sup>2</sup> und verteilt die ausgeatmete Luft sanft, sodass Ihre Patienten eine angenehme Nachtruhe genießen und ihrem Bettpartner näher sein können.

## AirFit F20 Komponenten




Standard-Kniestück  
**63476**

Rahmen  
**63465**  
**63466 for Her**


Maskenkissen  
**63467 (S)**  
**63468 (M)**  
**63469 (L)**

QuietAir Kniestück (separat erhältlich\*)  
**63494**

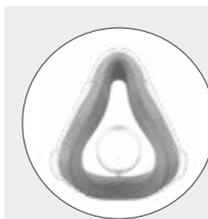


### AirTouch™ wird auch Ihre Patienten begeistern!

Das einzigartige AirTouch F20 Maskenkissen aus Memory-Schaum ist mit der AirFit F20 Maske kompatibel. Ihre Patienten können es separat erwerben\* und nach Belieben zwischen dem AirFit F20 und dem AirTouch F20 Maskenkissen wechseln.

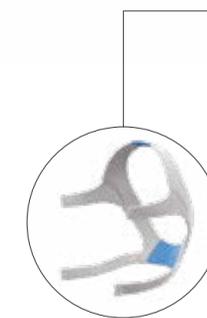

AirFit F20 Kopfband  
**63470 (S)**  
**63471 (Std)**  
**63472 (L)**

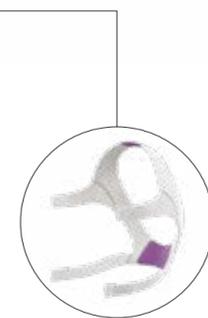

AirFit F20 for Her Kopfband  
**63473 (S)**

## Artikelnummern

### AirFit F20 Maskensysteme

AirFit F20: Small	<b>63405</b>
AirFit F20: Medium	<b>63406</b>
AirFit F20: Large	<b>63407</b>
AirFit F20 for Her: Small	<b>63408</b>
AirFit F20 for Her: Medium	<b>63409</b>

### AirTouch F20 Maskenkissen\*

AirTouch F20 Maskenkissen: Small	<b>63028</b>
AirTouch F20 Maskenkissen: Medium	<b>63029</b>
AirTouch F20 Maskenkissen: Large	<b>63030</b>

## AirFit F20 for Her

Speziell für Frauen entwickelt, in einer etwas kleineren, den weiblichen Gesichtskonturen angepassten, Größe.

