

NEU

DEDRY®PRO

Desinfektion & Trocknung von Medikamentenverneblern in einem Durchgang

Der DEDRY®PRO ist Ihre Unterstützung u.a. bei Mukoviszidose, COPD & Asthma. Nach der Desinfektion sorgt der DEDRY®PRO durch die integrierte Trocknung dafür, dass sich keine neuen Bakterien (insbesondere Feuchtkerne) oder Viren durch Wasseranhaftung bilden. Der DEDRY®PRO erreicht die höchstmögliche Desinfektionswirkung (A0=3000 s) und trocknet das Desinfektionsgut dank des speziell eingesetzten HEPA-Filters mit bakterien- und virenfreier Trocknungsluft zu 100%.

Vorteile auf einen Blick

- Einfache Handhabung - Desinfektions- und Trocknungslauf wird mit nur einem Schalter gestartet. Unkomplizierte Benutzerführung durch die LED-Statusanzeige und akustische Signaltöne
- Umfassender Schutz vor einer Neuverkeimung durch Feuchtkerne
- Geringes Gewicht macht eine hygienische Versorgung unterwegs möglich
- Hohe Desinfektionsleistung bis A0-Wert 3000 und keine Neuverkeimung durch die Trocknungsluft
- Aufgrund der bestätigten Desinfektionsleistung ist der DEDRY®PRO eine optimale Therapieunterstützung u.a. bei Mukoviszidose, COPD, Asthma und weiteren Anwendungsgebieten
- Geeignet für alle Medikamentenvernebler, CPAP-Masken und Atemtherapiegeräte*, die für eine Wasserdampfdesinfektion geeignet sind



Technische Daten

Betriebsspannung	220-240V 50/60 Hz
Leistung	
Desinfektionsvorgang	650 W
Trocknungsvorgang	300 W
Maße (BxLxH)	208 x 282 x 185 mm
Gewicht (inkl. Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang

Gerät DEDRY®PRO
HEPA-Filter H13
Korb (für Desinfektionsgut)
Zange (für Desinfektionsgut)
Netzkabel
Entriegelung
Messbecher

*Nur unter Verwendung der optionalen Abdeckhaube 35+ möglich.


DEDRY®DESTRO

Desinfektion & Trocknung von Medikamentenverneblern in einem Durchgang

Der DEDRY®DESTRO ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das zur Desinfektion und Trocknung von wiederverwendbaren Inhalationssystemen ideal geeignet ist. Der DEDRY®DESTRO desinfiziert und trocknet mit nur einer Anwendung und beseitigt damit das Risiko einer Neuverkeimung durch Restfeuchtigkeit. Damit ermöglicht das Gerät schnelle und sichere Desinfektion und Trocknung auf klinischem Niveau.

Vorteile auf einen Blick

- Direkter Einsatz auf der Klinikstation, im therapeutischen und im häuslichen Umfeld
- Universell einsetzbar, da das Gerät nicht mit Druck arbeitet
- Medikamentenvernebler sind bereits nach ca. 30 Minuten wieder einsetzbar
- Kompletter Verzicht auf Chemie, Reinigung nur mittels Wasserdampf
- Heißlufttrocknung mit über 90° C heißem, durch Hochleistungs-Partikelfilter gefiltertem Luftstrom.
- Sehr simple Handhabung durch Ein-Tastenbedienung
- Einfacher Wechsel des Hochleistungs-Partikelfilters nach jeweils 500 Zyklen
- Einfache Reinigung des Korb-Deckel-Sets (bei Patientenwechsel) in gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten oder durch Sterilisation
- Geeignet für alle Medikamentenvernebler, CPAP-Masken und Atemtherapiegeräte, die für eine Wasserdampfdesinfektion geeignet sind

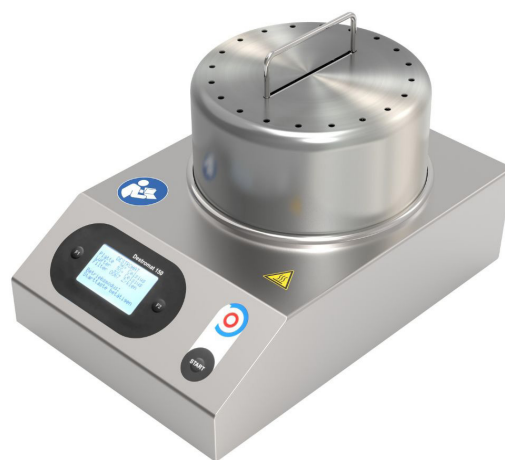

Zertifiziertes & verordnungsfähiges Medizinprodukt



Technische Daten

Nennspannung	220-240V AC
Nennaufnahme	max.: 800W
Nennfrequenz	50 / 60Hz
Betriebstemperatur	0° C - +40° C
Sicherungen	T4L250V
Gewicht	8 kg

Lieferumfang

Gerät DEDRY®DESTRO
EPA-Filter H11
Korb-Abdeckung-Set
Netzkabel
Messbecher