

# Respireo SOFT Baby

## Atmung kinderleicht



Respireo SOFT Baby ist eine Beatmungsmaske für Kinder bis 15 Monate. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit Neonatologen und Experten der Kleinkinderbeatmung entwickelt. Denn Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene – sie haben eine spezielle Gesichtsform.


Diese birgt besondere Herausforderungen: Die Beatmungsmaske Respireo SOFT Baby berücksichtigt z. B. ihre prominente Stirn, ihre wenig ausgeprägte Nasenwurzel und ihre wachsende, empfindliche Knochenstruktur. Jedes Detail der Maske ist darauf abgestimmt.

Das Maskenkissen besteht aus hautfreundlichem, weichem, flexiblem Silikon. Es passt sich der Gesichtsform perfekt an und vermeidet Druckstellen. Die speziellen Kopfbänder mit fünf Befestigungspunkten sorgen für einen sicheren, dichten Sitz ohne einzuengen oder zu drücken.

Die Stirnstütze kann durch einfaches Abschneiden entfernt werden. So passt sich die Maske auch besonderen Gesichtsformen an (z. B. Fehlbildungen, stark gewölbte Stirn) und vermeidet Mittelgesichtsdeformationen.



# Respireo SOFT Baby

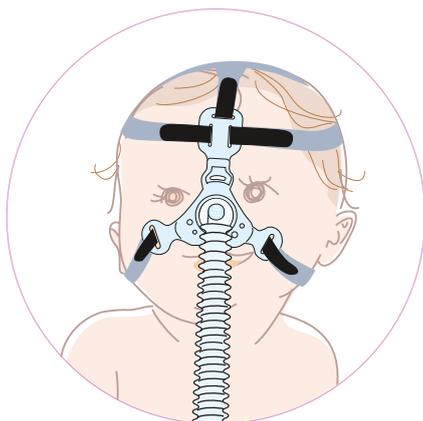

## 5-Punkt-Kopfband

Vier großflächige Bänder und das zusätzliche fünfte Band auf der Stirn bieten gleichmäßige Befestigungspunkte und stabilen Halt unabhängig vom Beatmungsdruck und der Körperlage.

## Weiches, komfortables Maskenkissen

Die dünne, einzigartig geformte Dichtlippe vermeidet Leckagen bei minimalem Druck auf das Gesicht.

## 360° Kugelgelenk

Das Kugelgelenk und der flexible Schlauch ermöglichen dem Baby maximale Bewegungsfreiheit.

## Der flüsterleise Diffusor

lässt das Baby ruhig schlafen.

## Diagnostikanschluss

Für alle Arten von nichtinvasiven Messungen (CO<sup>2</sup>, Druck, etc.)



Auch erhältlich als non-vented Version



## Artikelnummer

Respireo SOFT Baby <i>vented</i> XS	HMV-Nr.: 14.24.16.2064	KM225300
Respireo SOFT Baby <i>vented</i> S	HMV-Nr.: 14.24.16.2064	KM225400
Respireo SOFT Baby <i>non-vented</i> XS	HMV-Nr.: beantragt	KM227300
Respireo SOFT Baby <i>non-vented</i> S	HMV-Nr.: beantragt	KM227400
Kopfband XS		KM225500
Kopfband S		KM225600
Maskenschlauch <i>vented</i> Ersatz (10 Stk.)		KM228000
Maskenschlauch <i>non-vented</i> Ersatz (10 Stk.)		KM228100

Kann bis zu 12 Mal desinfiziert und sterilisiert werden (mittels Autoklavierung und thermischer Desinfektion). Bitte erneuern Sie bei Patientenwechsel das Kopfband und den Maskenschlauch. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns oder Ihren Fachhändler.