

Unbeschwert schlafen auf Luftkissen



Freiheit... mit Zusatzfunktionen

- ⊕ **Q-Abdeckung** für eine leisere Anwendung
- ⊕ Noch immer eine **bequeme Maske in einer Größe** aus drei problemlos zu reinigenden Teilen
- ⊕ Alternativ ist das **verstellbare Kopfband** jetzt als Ersatzteil erhältlich


Genau das, was Sie wollten – eine noch leisere Nasalkissenmaske mit optionalem verstellbarem oder Stretchwise™-Kopfband (als Ersatzteil erhältlich). Dank dieses erweiterten Angebots erleben Sie eine geräuschärmere Anwendung mit weniger Luftzuggeräuschen.

Die F&P Pilairo Q* ist nicht nur eine unserer leichtesten CPAP-Nasalkissenmasken (55 Gramm), sondern auch eine der leisesten und leistungsfähigsten für Patienten. Das intelligente Design ermöglicht die Integration der selbstaufblasenden AirPillow™-Dichtung und bietet Ihren Patienten Bewegungsfreiheit und Stabilität, der sie vertrauen können.

*F&P Pilairo Q mit Stretchwise-Kopfband



Das F&P Pilairo Q wurde entwickelt, um die Patientenzufriedenheit zu steigern. Das F&P Pilairo Q ist eine äußerst effektive Nasalkissenmaske aus drei Hauptkomponenten und zwei verschiedenen Kopfbändern, die mit dem Hauptaugenmerk auf Komfort, Dichtigkeit und leichte Handhabung entworfen wurde.

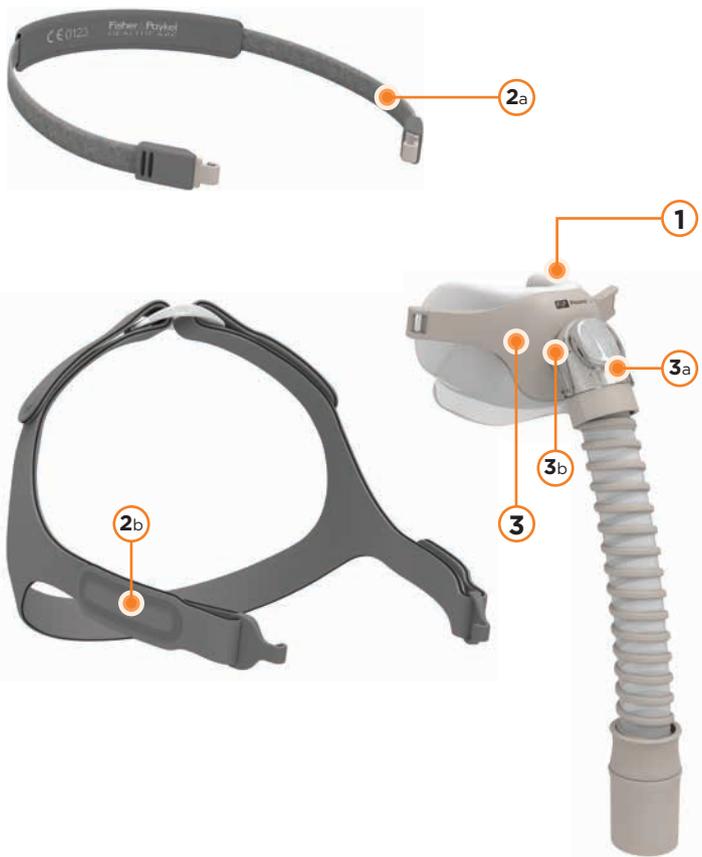

Drei Hauptkomponenten:

1. AirPillow-Dichtung

Die AirPillow-Dichtung verfügt über eine 3D-Kontur aus Silikon von variabler Stärke (VTS™) und verwendet CPAP-Druck zum Selbstaufblasen, um eine effektive, aber dennoch angenehme Doppeldichtung in und an der Nase zu schaffen. Die AirPillow-Dichtung lässt sich flexibel in jede Richtung bewegen, ohne Dichtigkeitsverlust.

2. Optionale Kopfbänder: Stretchwise- oder verstellbares Kopfband

a. Stretchwise-Kopfband

Dieses minimalistische Kopfband aus einem weichen, elastischen, latexfreien Gewebe mit intelligenten Dehnungseigenschaften passt sich dem Träger automatisch an, um einen schnellen und einfachen Sitz zu ermöglichen.

b. Verstellbares Kopfband – ein alternatives Ersatzteil

Das atmungsaktive, ergonomisch geformte Kopfband passt zu noch mehr Kopfgrößen und ermöglicht eine genaue und bequeme Anpassung der Größe an den Patienten.

3. Leichter Rahmen

Der Rahmen mit niedrigem Profil ist stabil, langlebig und klein und ermöglicht eine klare Sicht. Der Zufuhrschlauch ist leicht, äußerst flexibel und für minimalen Druck oder Zug auf dem Gesicht ausgelegt. Die Stabilisatoren sind das Tragegerüst für die AirPillow-Dichtung und sorgen für zusätzliche Stabilität.

a. Q-Abdeckung

Für eine geräuschärmere Verwendung¹ und minimale Luftzuggeräusche.

b. Das Kugelgelenk

Es sorgt dank seiner Drehung für Bewegungsfreiheit und minimalen Zug durch den CPAP-Schlauch.

¹ Der Schalldruckpegel der Maske mit Q-Abdeckung beträgt 23,6 dBA, der Unsicherheitsfaktor 2,5 dBA.



Tragekomfort



Dichtigkeit



Einfache Handhabung

Bestellnummern

400420U	F&P Pilairo Q – inklusive Stretchwise-Kopfband	400HC322	F&P Pilairo Q Stretchwise-Kopfband – außerhalb der USA	400HC588	Clips und Schnalle für F&P Pilairo Q-Kopfband
400HC125	F&P AirPillow-Dichtung	400HC565	F&P Pilairo Q-Nasalkissenmaske (ohne Kopfband)	400HC224	Drehgelenk-Buchse
400HC326	Anpassbares F&P Pilairo Q-Kopfband – außerhalb der USA	400HC229	Winkelteilabdeckung und Luftverteiler für F&P Pilairo Q (10er Pack)		