

Quattro™ Air ... der leichtere Weg zu besserem Schlaf



Die neue leichte Full Face Maske **Quattro Air** von ResMed baut auf der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit der Mirage Quattro™ auf. Sie bietet verbesserten Komfort und leichtere Handhabung und ist außerdem 45% leichter* als das Vorgängermodell Mirage Quattro.

Vorteile für Sie ...

Baut auf den Stärken der Mirage Quattro auf
Quattro Air bietet Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Die Maske ist schlanker, leichter und unauffälliger.

Schneller und einfacher Zusammenbau
Die Quattro Air besteht aus nur vier Einzelteilen – weit weniger als die meisten bisherigen Full Face Masken. Die Handhabung lässt sich schnell erklären und ist für den Patienten leicht zu erlernen – die Basis für eine höhere Compliance.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Während der Aufbau stark vereinfacht ist, bietet die Maske dennoch verbesserten Komfort und Sitz. Die unkomplizierte Handhabung erleichtert die alltägliche Anwendung.

... und Ihre Patienten

Leicht und unauffällig
Die Quattro Air ist leichter und unauffälliger als andere Full Face Masken und sie bietet außerdem ein transparenteres Gesichtsfeld, so dass sich die Patienten weniger eingeengt fühlen.

Intuitiv und unkompliziert
Die Verwendung der Quattro Air ist für den Patienten unkompliziert. Die Maske lässt sich schnell und einfach reinigen und wieder zusammenbauen.

Fester Sitz auf der Stirn
Die moderne flexible Flügelstirnstütze ist komfortabel und liegt leicht auf dem Gesicht auf.

Leiser Betrieb
Die kreisförmige Ausatemöffnung verteilt den Atemfluss sanft und leise und sorgt so mit nur 28 dBA** für eine äußerst leise Umgebung für Anwender und Partner.



Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

* Die Quattro Air Medium ist um 45% leichter als die Mirage Quattro Medium.

** Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte (mit einer Messtoleranz von 3 dBA) gemäß ISO 4871:1996

Noch mehr Komfort ...

Dank einer Reihe von Design-Verbesserungen ist die Quattro Air leichter, schlanker und noch komfortabler als die Mirage Quattro.

Da sie nur noch aus vier Teilen besteht, ist sie außerdem einfacher in der Handhabung. Dies erleichtert dem Patienten zu verstehen, wie die Quattro Air zu verwenden und nach der Reinigung wieder zusammenzubauen ist.

SoftTouch Kopfband

aus hochwertigem Stoff mit Rollsaum, der Druckstellen im Gesicht verringert und angenehm zu tragen ist.



Verbesserter Tragekomfort

verringert die Möglichkeit von Hautreizungen im empfindlichen Nasenrückenbereich.

Zirkuläre Ausatemöffnung

verteilt die Luft und sorgt so für eine äußerst leise Therapie für Patient und Partner.


Kniestück mit Entriegelungsknöpfen

für schnelleres und vereinfachtes Anlegen und Abnehmen.

Flexible Flügelstirnstütze
ermöglicht eine dynamische Anpassung und liegt leicht auf dem Gesicht auf.

Doppelwandiges Maskenkissen mit Luftfedertechnologie
sorgt für hervorragende Abdichtung bei noch besserem Tragekomfort.

Kopfbandschlaufen
vereinfachen das Anlegen und verbessern die Anwenderfreundlichkeit.

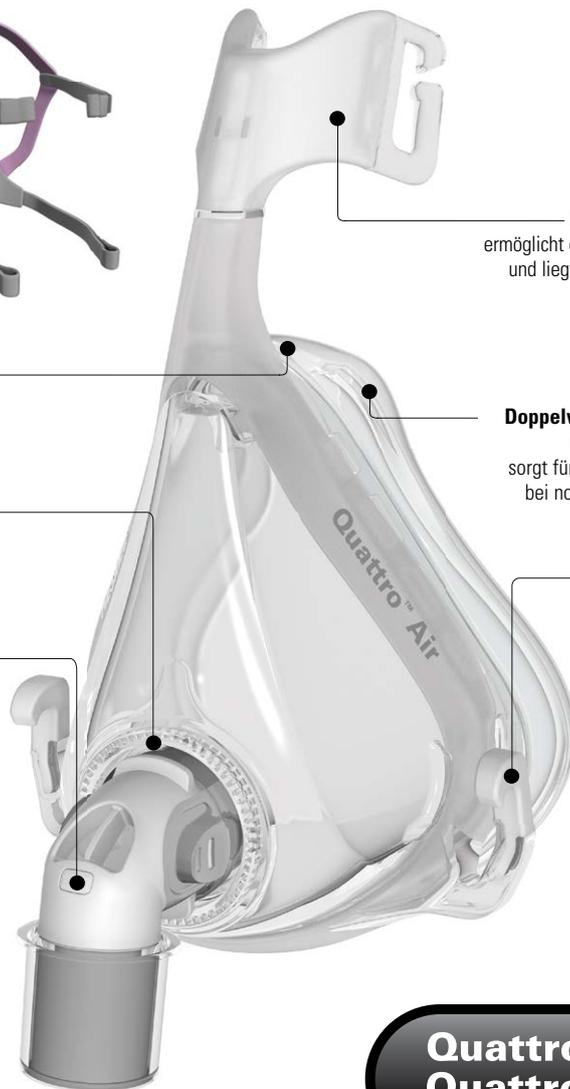

Artikelnummern

Quattro Air Maskensystem Small	62705
Quattro Air Maskensystem Medium	62706
Quattro Air Maskensystem Large	62707
Quattro Air for Her Maskensystem Extra Small	62743
Quattro Air for Her Maskensystem Small	62744
Quattro Air for Her Maskensystem Medium	62745

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Quattro Air Full Face Maske.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **CE/REP** ResMed (UK) Ltd. 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Mirage Quattro und Quattro Air sind Marken der ResMed Pty Ltd. und sind beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2013 ResMed. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1016025/1 2013-06.